

INFLAMETRU CU CUPA INCHISA LOIP LP-093



Manual de Operare

**Saint-Petersburg
2008**

Daca aveti intrebari legate de modul de operare al acestui aparat, va rugam consultati spuportul nostru tehnic. Tel. (812) 449-8195

Contents

1. INAINTE DE UTILIZARE.....	3
1.1. DESCRIEREA APARATULUI.....	3
1.2. CONDITII DE OPERARE	3
2. SIGURANTA	4
3. SPECIFICATII	5
3.1. CARACTERISTICI TEHNICE.....	5
3.2. PACHET DE LIVRARE	5
4. STRUCTURA ECHIPAMENTULUI.....	6
4.1. INFORMATII GENERALE.....	6
4.2. DESIGN.	6
4.3. INDICATII SI ELEMENTE DE CONTROL	9
5. INSTALARE SI CONECTARE	10
5.1. CONECTAREA LA O SURSA DE CURENT	10
5.2. CONECTAREA LA O SURSA DE GAZ	10
5.3. DETASARE SI INSTALARE CUPA.	12
6. OPERAREA APARATULUI.....	17
6.1. CARACTERISITICI DE OPERARE.....	17
6.2. PORNIREA APARATULUI	18
6.3. SELECTAREA UNUI PROGRAM SI VIZUALIZAREA PARAMETRILOR.....	18
6.4. PARAMETRII PROGRAMELOR PRESETATE	20
6.5. SCHIMBAREA PARAMETRILOR UNUI PROGRAM.	22
6.6. CREAREA UNUI NOU PROGRAM.	24
6.7. STERGerea UNUI PROGRAM	24
6.8. PROCEDURA DE OPERARE.....	24
6.9. VIZUALIZAREA REZULTATELOR SALVATE	29
6.10. MENU SETARI APARAT	30
7. CONECTAREA LA TO PC	31
8. INTRETINERE	31
8.1. CURATARE SI PASTRARE	31
8.2. INSTALAREA UNITATII DE APRINDERE A GAZULUI.....	32
8.3. SCHIMBAREA SERPENTINEI ELECTRICE DE INCALZIRE	35
8.4. AJUSTAREA UNITATII DE IGNITIE.....	38
8.5. MENTENANTA SI REPARATII.....	39
9. STOCARE SI TRANSPORT.....	39
10. GARANTIE.....	39
11. RECICLARE	40
12. TEST CERTIFICATE	40

1. ÎNAINTE DE UTILIZARE

va rugam sa cititi cu atentie manualul înainte de a utiliza aparatul.

utilizarea aparatului fara a tine cont de instructiuni poate duce la functionarea defectuoasa a acestuia si la ranirea personalului operator.

1.1. Destinatia aparatului

Aparatul de testare a punctului de inflamabilitate LOIP LP-093, numit de acum înainte «aparatul», este destinat testarii inflamabilitatii produselor petroliere in cupa inchisa in conformitate cu GOST 6356-75 (method A) «Closed Cup Flash Point Test Method» (ISO 2719), ASTM D93A, ASTM D93B si alte standarde similare la temperaturi de pana la +370°C.

1.2. Conditii de operare

aparatul este destinat utilizarii in urmatoarele conditii:

- Numai in interior;
- Domeniu de temperatura: +5°C to +40°C;
- Umiditate relativa maxima 80% pentru temperaturi de pana la 31°C cu scaderea liniara a umiditatii de pana la 50% f pentru temperaturi in cerstere de pana la 40°C;
- Altitudine maxima 2000 m;
- Voltaj 220V, ttoleranta 198...242V;
- Frecventa 50Hz, instabilitate frecventa maxim ± 2 Hz.

Aparatul nu este destinat operarii in medii combustibile si explozive.

Aparatul este în conformitate cu GOST 12.2.003-91 regulile generale de siguranță de lege și reglementările de siguranță cerințele pentru echipamente electrice de măsurare, control și aplicarea de laborator în conformitate cu GOST R 52319-2005 (IEC 61010-1:2001) și GOST R MEK 61010-2-010 (IEC 61010-2-010:2003) .

Echipamentul este conform GOST cu 12.2.007.0-75 clasa 1 cerințele de protejare a omului de la soc electric.

Atunci când se lucrează cu echipamentul, ar trebui să fie respectate cerințele “regulamentele de funcționare pentru instalații de putere” și “Întreținere regulamentele de securitate pentru instalații de putere” aprobate de Gosenergonadzor și GOST 12.2.007.0-75

2. Prevederi de siguranta

Lucrul cu echipamentele se va face numai de personal calificat si instruit in protectia muncii și numai după citirea și înțelegerea acestui manual operațional este permis lucrul.

- Nu conectați echipamentul la sistemul de alimentare fără împământare corespunzătoare.
- Nu utilizați de alimentare cu apa, aprovizionarea cu gaz sau conducte de canalizare și paratrăsnete pentru împământare.
- Evitați deteriorarea cablului de alimentare și contactul cu suprafețele fierbinți ale echipamentului.
- Nu utilizați echipamentul cu defectiuni mecanice, pauze, rupturi, fisuri și coroziune de secțiuni de lucru a echipamentelor.

ATENȚIE! Atunci când se lucrează cu echipamentul vă rugăm să observați, că anumite părți ale sale devin foarte fierbinti. Amintiți-vă că manipularea de echipamente fierbinti poate duce la arsuri.

- Nu atingeți părțile fierbinți ale echipamentului în timpul funcționării sale.
- Se efectuează toate lucrările de întreținere și curățenie după oprirea completa a echipamentelor din sistemul de alimentare și după racirea sa completa.
- Amintiți-vă că utilizatorul poartă responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de siguranță atunci când se lucrează cu eșantioane de testare de materiale specifice.
- Nu lăsați nici un produs sau lichid sa pătrunda în interiorul carcasei echipamentului. Acest lucru poate duce la ruperea echipamentului sau la accidente.
- Amintiți-vă că, în caz de pătrundere a materialelor periculoase, agresive, reactive pe suprafața sau în interiorul echipamentului responsabilitatea pentru eventualele consecințe este doar a utilizatorului. La finalizarea lucrului astfel de materiale, utilizatorul trebuie să își asume toate măsurile corespunzătoare pentru neutralizarea posibilelor consecințe dăunătoare, în conformitate cu instrucțiunile, si aprobate de inginerul șef al întreprinderii.

ATENȚIE! Înainte de a aplica orice metoda de neutralizare, cu excepția celor destinate de către producător, asigurați-vă că metoda selectată nu va duce la orice daune asupra echipamentului.

3. Specificatii

3.1. Caracteristici tehnice

Domeniul de masurare al punctului de inflamabilitate ¹ .
+370°C

de la +40 la

Viteza de incalzire. de la 0.5 la 15.0°C/min

Interval de ignitie. 0.5 ... 10.0°C

Frecventa de agitare . 30 ... 240 rpm
Consum maxim. 700 W
Alimentare 220 V

3.2. Scopul livrării

Consum maxim. 700 W

LOIP LP-093 aparat . 1 pcs.

Cupa cu capac . 1 pcs.

Senzor Temperatura Pt-100. 1 pcs.

detector ignitie . 1 pcs.

Unitate electrica de ignitie (instalat pe instrument) .
de ignitie in gaz . 1 pcs.

1 pcs.Unitate



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit
: www.pdfediting.com

4. Structura Echipamentului

4.1. Informatii generale

Esența metodei de testare în cupa închisă a punctului de aprindere conform GOST 6356-75 constă în definirea temperaturii minime de aprindere a unui agent de combustibil. În timpul testării, pe suprafața agentului se formează un amestec de vapori și gaze cu aer, care este capabil să se aprindă în aer de la o sursă de aprindere, dar rata lor de producție nu este încă suficientă pentru ardere în continuare. În această metodă, un eșantion de testare este încălzit într-o cupă închisă cu o viteză constantă și în agitare continuă și este testat pentru a se aprinde, la intervale de temperatură specifice. Testarea temperaturii eșantionului este măsurată de un senzor de temperatură Pt-100. Punctul de aprindere se realizează prin imersia unității de aprindere (gaz sau electrice), într-o cupă. O aprindere este înregistrată folosind un detector de scanteie. La înregistrarea ei aprinderii încălzirea se oprește și se afișează valoarea de temperatură. La sfârșitul unui test, pornește automat un ventilator pentru răcire.

4.2. Design aparat

Aparatul este proiectat ca o unitate compactă, conținând panoul de control (1), modulul de testare (2), suportul de cupă (3) și suportii senzorilor (4). O vedere generală a aparatului este prezentată în fig. 1.

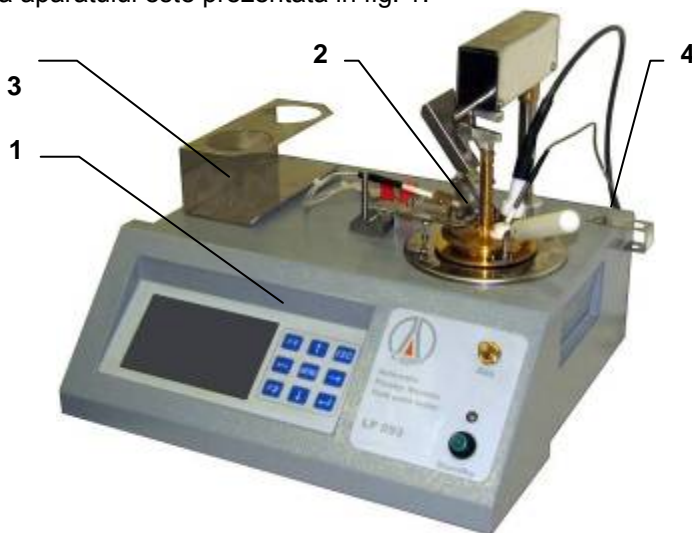


Fig. 1. LOIP LP-093 . vedere generală

Modulul de testare constă în (vezi fig.2): element de încălzire (1), cupă închisă (2), agitator (3), unitate de igniție (4), senzor de temperatură (5), detector de scanteie (6).

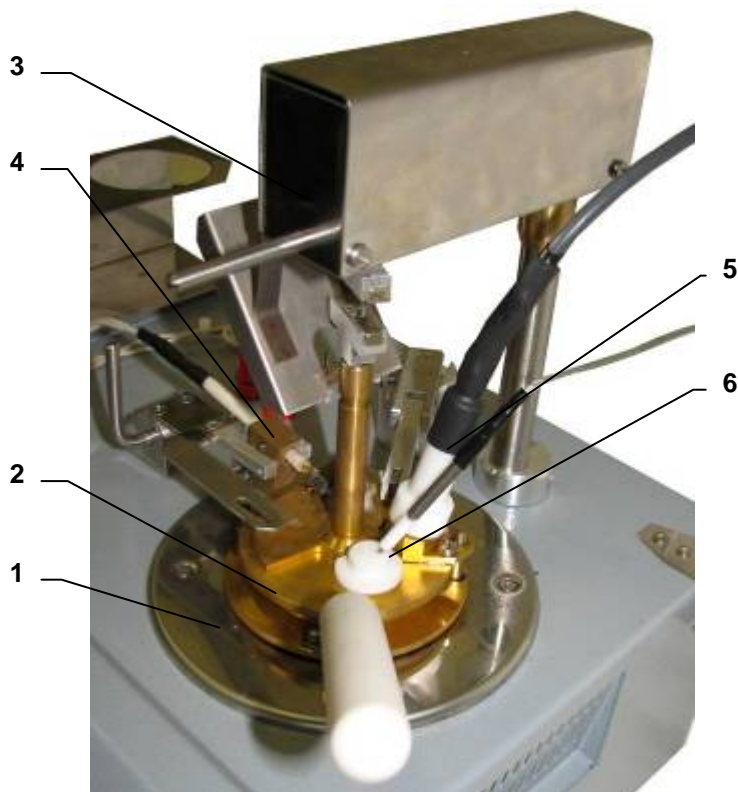


Fig. 2. LOIP LP-093 . Modulul de testare

Proba se introduce într-o cupa detasabilă (2) cu un capac ce se deschide și închide printr-un motor electric. Cupa este încălzită conform programului selectat de către un element de încălzire (1).

Agitarea fluidului se face cu un agitator (3) livrat cu un opritor magnetic. Acesta previne supraincercarea agitatorului când proba este foarte vâscoasă. Astfel, înainte de a se ajunge la temperatura la care vâscozitatea probei este redusă, se împiedică colmatarea agitatorului.

Igniția vaporilor în cupa este implementată de unitatea de igniție (4).

Unitatea de aprindere variază în funcție de aplicație și poate fi electrică sau pe gaz.

Unitatea de aprindere electrică este echipată cu o serpentină de răcire. Se încălzește la o temperatură ce asigură o igniție stabilă înainte de a fi coborâtă în cupa.

Unitatea de aprindere pe gaz este un arzător conectat la o sursă de gaz prin panoul din spatele aparatului. Alimentarea cu gaz este ajustată printr-o valvă în panoul de control. Datorită posibilității de aprindere în afara cupei, aparatul este

echipat cu un sistem de racire.

Senzorul de temperatura (5), conectat printr-o mufa in spatele aparatului, realizeaza masurarea punctului de inflamabilitate. Senzorul de temperatura este o termorezistenta Pt-100.

Detectorul de scanteie (6), conectat printr-o mufa in spatele aparatului, inregistreaza temperaturile corespunzatoare ignitiilor.

Aparatul este echipat cu un senzor integrat de presiune atmosferica ce permite corectia conform GOST 6356-75.

Pe panoul din spatele aparatului (vezi fig. 3) sunt 3 sigurante (1), bransament de conectare pentru sursa de gaz (2), conectorul senzorului de temperatura (3), conectorul detectorului de scanteie (4), cablu (5), comutator de tensiune (6), conector USB pentru PC³ (7) si un comutator de urgenta al unitatii de ignitie (8).

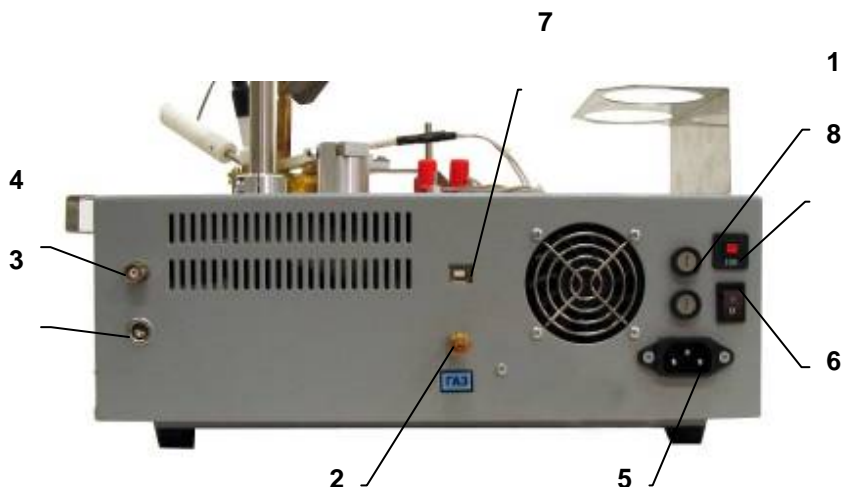


Fig. 3. LOIP LP-093 . panoul din spate.

³ Pentru detalii referitoare la modul de conectare a aparatului la un PC a se vedea secțiunea 7.

4.3. Indicatii si elemente de control

Elemente de indicatii si control (vezifig.4):

- Display grafic, menit indicarii parametrilor de operare (1).
- Taste pentru definire si modificare parametrii de operare (2):



cursor si selectarea parametrilor (stanga /dreapta);



cursor si crestere/scadere a parametrului selectat (sus / jos);



tasta aprobare (enter);



tasta anular



setare meniu;



tasta auxiliara 1;



tasta auxiliara 2;

- Start-Stop-Reset button (3).
- Valva de gas pentru reglarea debitului de gaz (4).
- LED martor (5).

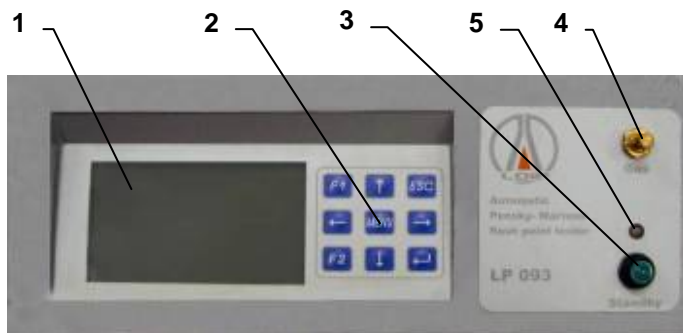


Fig. 4. LOIP LP-093 Panoul de control

5. Instalare si conectare

După despachetarea si instalarea aparatului la locul de munca, prima pornire este permisă nu mai devreme de 2 ore. Înainte de a porni echipamentul, vă rugăm, citiți acest manual cu atenție și asigurați-vă că rețeaua de alimentare este în conformitate cu tensiunea nominală de funcționare.

Instalați aparatul în conformitate cu cerințele GOST 6356-75, a se vedea secțiunea 2.2.1. Atunci când se lucrează cu substanțe toxice și materiale volatile toxice se recomanda ca locul aparatului sa fie într-o hotă de tiraj.

5.1. Conectarea la o sursa de tensiune

TAparatul este proiectat pentru a opera la o tensiune de 220 VAC si la o frecventa de 50 Hz.

ATENȚIE! Echipamentul trebuie impamantat! Aparatul se livreaza cu cablu de impamantare si cu un conector de impamantare. Pentru conectarea echipoamentului folositi doar o opriza cu impamantare. Nu este permisa utilizarea aparatului fara impamantare.

Rezistența electrică a buclei de impamantare nu trebuie să fie mai mare de 4 Ohm. Înainte de prima comutare, vă rugăm, să vă asigurați că toate conexiunile electrice au o calitate ridicată și sunt conforme direcțiilor de conectare.

5.2. Conectarea la o sursa de gaz⁴

Înainte de a porni aparatul, conectați-l la o sursă de gaz. Următoarele combinații sunt uzual folosite:

- Conectarea la o linie staționară de gaz.
- Conectarea la o butelie de gaz, cu un reductor de presiune.

⁴ Numai dacă aparatul are o unitate de igniție pe gaz.

- Conectarea la butelia domestica de gaze naturale (utilizarea reductorului este recomandată, dar nu este necesara).
- Racordarea la butelia de gaz portabila cu ajutorul adaptorului, inclus în setul de livrare.

ATENȚIE! Când se utilizează gaz condensat, este important de verificat ca butelia este întotdeauna în poziție verticală.

Presiunea ideala la intrarea in aparat este – 40...50 kPa, maximum – 500 kPa. Tuburile dse conectare trebuie adaptate acestei presiuni. Bransamentul aparatului este (vezi fig.5) multiuz iar furtunele au diametre 2 si 10 mm.



Fig. 5. LOIP LP-093 Bransament de conectare la o sursa de gaz.

Sursa de gaz trebuie să fie echipata cu o supapă. Atunci când aparatul nu este folosit inchideti supapa.

ATENȚIE! La instalarea aparatului, este important de verificat ca furtunurile care conduc la arzător nu sunt răsucite. În caz contrar, este posibil să nu puteti cobori arzătorul la o adâncime dorită.

5.3. Detasarea si instalarea cupei

Detasarea cupei se face astfel:



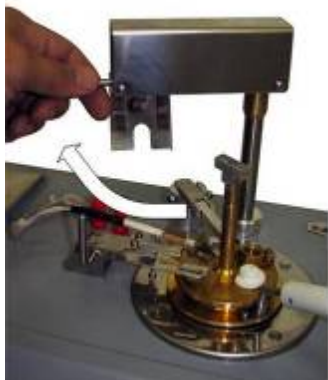
Pozitie initiala – cupa instalata.



Trageti cu atentie senzorul de temperatura din cupa prin gaura din capac si plasati-l in suport.



Trageti cu atentie detectorul de scanteie din cupa prin gaura din capac si plasati-l in suport.



Utilizand manerul intoarceti carcasa agitatorului.



Utilizand manerul ridicati unitatea de ignitie in pozitie verticala



Ridicati intreruptroul de pe capac in pozitiei verticala.

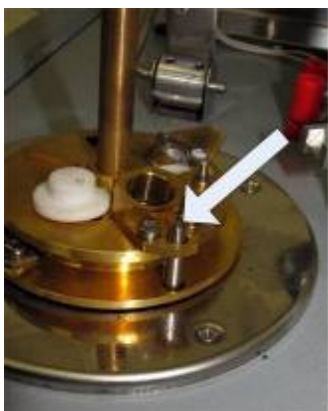


Scoateti cupa si plasati-o pe suport.

Pentru instalarea cupei procedati in felul urmator:




Inainte de a instala cupa verificati daca gaurile din capac si carcasa sunt aliniate.




Plasati cupa in elementul de incalzire astfel incat tija instalata pe elementul de incalzire sa treaca prin capac si prin carcasa.



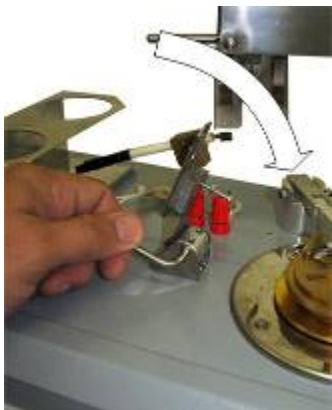
Coborati driverul cupei in pozitie orizontala astfel incat tija de pe cupa sa se patrunda cu furca driverului.



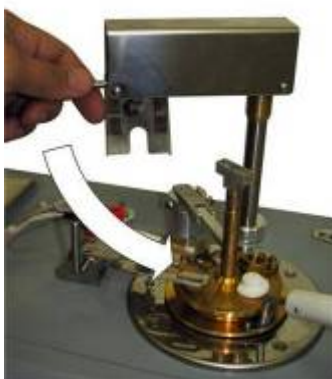Utilizand un maner coborati unitatea de ignitie in pozitie orizontala.



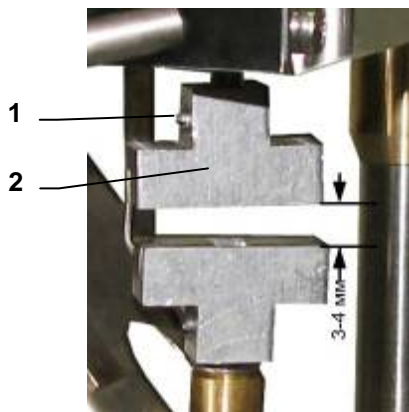Utilizand un maner rotiti carcasa agitatorului astfel incat ambele parti ale opritorului magnetic sa fie una deasupra celeilalte.



Verificati valoarea spatiului in opritorul magnetic. Ajustati daca este nevoie cu dispozitivul mecanic de oprire cu surub (1), schimbati [pozitia magnetului (2) pe tija astfel incat spatiul sa fie de 3-4 mm. Dupa ajustare, blocati opritorul cu o surubelnita.



Plasati senzorul de temperatura in gaura din capacul cupei.



Plasati detectorul de scanteie in gaura dedicata din capacul cupei, cu grija, pentru a nu deteriora senzorul.

6. Operarea aparatului

ATTENTIE! personalul operator trebuie sa studieze acest manual.

6.1. Caracteristici de operare

Metoda de testare – aparatul permite utilizarea metodelor standard de testare cu definirea anumitor parametri în mod automat în conformitate cu cerințele standardului. ermite, de asemenea, o metodă suplimentară care permite definirea tuturor parametrilor manual. Aparatul permite alegerea trei metode standard: GOST 6356-75, ASTM D93A și D93B ASTM.

T_{efp} – punct de inflamabilitate estimat utilizat pentru metodele standard. Coborarea unitatii de ignitie la $T_{\text{efp}} - 17^{\circ}\text{C}$.

Daca la atingerea T_{efp} nu se inregistreaza nicio scanteie, incalzirea continua pana la $T_{\text{eff}} + 20^{\circ}\text{C}$ si testul se opreste. T_{cup} – temperatura curenta in cupa, **masurata de senzorul de temperatura**

T_i – domeniul initial de temperatura (utilizat pentru o metoda aditionala) – temperatura probei la care unitatea de ignitie incepe coborarea in cupa. Conform GOST 6356-75 acest parametru trebuie setat la 17°C sub temperatura de ignitie estimata. Valori permise: de la 0^{in} la 350°C .

T_f – temperatura finala de masurare (utilizat pentru o metoda aditionala) – temperatura probei la care testul se sfarseste. Se opreste coborarea unitatii de ignitie in cupa si incalzirea acesteia. Valoarea. T_f trebuie sa depaseasca T_i cu nu mai putin de 10°C . Este recomandata setarea T_f la 20°C peste punctul de ignitie estimat. Valori permise: from +20 to 370°C .

ATENTIE! Este imposibil de setat valoarea $T_f < T_i + 20^{\circ}\text{C}$

ΔT – intervalul de timp pentru coborarea unitatii de ignitie in cupa. In timpul testului (in domeniul de temperatura T_i to T_f) fiecare coborare succesiva a unitatii de ignitie in cupa are loc crescand T_{cup} cu ΔT . Toleranta ΔT este in domeniul 0 to 20°C . Conform GOST 6356-75 pentru probe cu punctul de inflamabilitate estimat pana la 104°C valoarea ΔT ar trebui sa fie 1°C , iar pentru probe cu punctul de inflamabilitate estimat sub 104°C valoarea ΔT ar trebui sa fie 2°C .

Incalzire – viteza de incalzire a probei. Se seteaza cu una din valorile metodelor standard, ce definesc viteza de incalzire in decursul intregului test ($^{\circ}\text{C}/\text{min}$). Pentru metodele suplimentare este stabilită de către două valori: V1 - viteza de încălzire înainte de începerea probei de testare (până ce T_i nu este atinsă) și V2 - proba de viteză de încălzire în timpul încercării (în intervalul de la T_i la T_f). Ambele valori pot fi in intervalul de la 0 la $20^{\circ}\text{C} / \text{min}$. Conform GOST 6356-75 viteza de încălzire în timpul încercării (în intervalul de la T_i la T_f), ar trebui să fie stabilite în de la 5 la $6^{\circ}\text{C} / \text{min}$. Viteza este incalzeste

nestandardizate de GOST 6356-75 si pot fi mai mari pentru a reduce durata testului.

Agitarea – este viteza rotatională a agitatorului in cupa. Valori permise: între 30 si 240 rpm. Conform GOST 6356-75 viteza de agitare ar trebui sa se situeze in intervalul 90 to 120 rpm.

6.2. Pornirea aparatului

La conectarea la priza a aparatului (fig. 4 item 5) ecranul afiseaza un mesaj continand informatii specifice producatorului. Dupa aceea, aparatul afiseaza o fereastra cu parametrii utilizati ultima data.

ATENTIE! După oprirea aparatului de la sursa de alimentare pornirea din nou nu este permisa mai devreme de 15-20 de secunde mai târziu.

6.3. Selectarea unui program si vizualizarea parametrilor

Dupa pornire aparatul intra in modul de selectare a programului. Se afiseaza fereastra principala, dupa cum se arata mai jos: fig. 6.

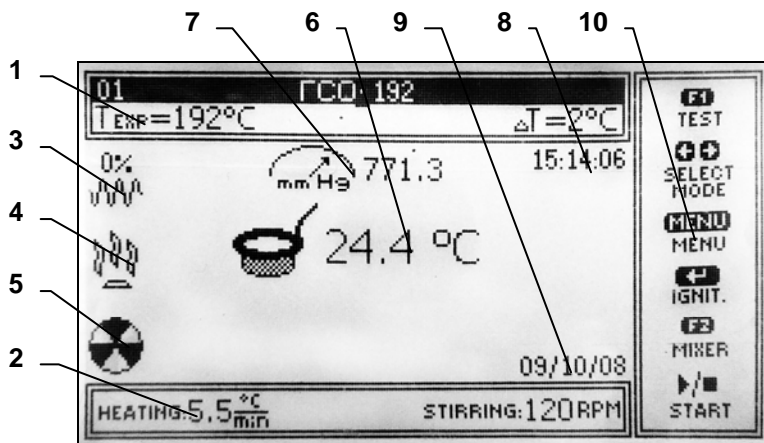


Fig. 6. Fereastra principala

Fereastra principala afiseaza urmatoorii parametrii in modul de selectie program:

- Fereastra parametrilor programului selectat (1).
- Fereastra parametrilor unui program additional (2).
- Indicator de ignitie (3).
- Indicator pornire incalzire (4).
- Indicator pornire ventilator (5).
- Valoarea T_{cup} (6).

- Valoarea presiunii atmosferice masurata de un senzor intern (7).
- Ora curenta (8).
- Data curenta (9).
- Functionare prompta a principalelor comenzi (10).

Pot fi stocate pana la 20 de programe in memoria aparatului.

Primele 3 programe sunt presetate si au posibilitatea editarii parametrilor. Celelalte sunt definite de catre utilizator.

Fiecare parametru de program este afişat pe ecran în două ferestre. Parametrii specifici programului stabilit depind de metoda de testare aleasă.

Prima fereastră contine:

- Nume si numar program.
- valoarea T_{efp} (pentru toate metodele, cu excepția unei metode suplimentară).
- valoarea T_i (numai pentru o metoda suplimentara).
- valoarea T_f (numai pentru o metoda suplimentara).
- valoarea ΔT .

A doua fereastră contine:

- Viteza de incalzire (pentru toate metodele, cu excepția unei metode suplimentară).
- Viteza de incalzire inainte de inceperea testului / in timpul testului (numai pentru o metoda suplimentara).
- Viteza de agitare.



Pentru a selcta un program utilizati tastele **d e m a i s u s**.
pentru a porni un program selectat folositi butonul Start-Stop-Reset **F1**

(fig.4 item 3).

6.4. Parametrii unui program presetat

În memoria aparatului pot fi stocate până la 20 de programe. Primele trei sunt setate din fabrică; sunt destinate rezolvării anumitor sarcini. Alte programe conțin valori implicite și sunt definite de utilizator. Parametrii programelor 1, 2 și 3 sunt date mai jos. 1.

Table 1. Parametrii programelor presetate

Numele programului	Parametru	Valoare
GOST 6356-75 (pentru cele mai multe produse petroliere)	Metoda	GOST 6356-75
	T_{efp}	220°C
	ΔT	1.0°C
	Viteza de încălzire	5.5°C/min
	Viteza de agitare	120 rpm
FAST SEARCH (pentru căutarea rapidă a punctului de inflamabilitate)	Metoda	Additională
	T_i	40°C
	T_f	370°C
	ΔT	5.0°C
	Viteza de încălzire	10.0°C/min
	Viteza de agitare	120 rpm
ULEI VEGETAL (pentru uleiuri vegetale conform GOST 9287)	Metoda	GOST 6356-75
	T_{efp}	200°C
	ΔT	2.0°C
	Viteza de încălzire	2.0°C/min
	Viteza de agitare	60 rpm

Pentru programele definite de utilizator parametrii implicați sunt identici și sunt prezentați în tabelul 2.

Table 2. Parametrii implicați pentru programele definite de utilizator.

Metoda	Parametru	Valoare
GOST 6356-75	T_{efp}	0°C
	ΔT	Parametrii sunt setați automat conform standardului
	Viteza de încălzire	
	Viteza de agitare	

⁵ Numele programelor ar putea diferi de cele prezentate în acest manual.

ASTM D93A	T_{efp}	0°C
	ΔT	Parametrii sunt setati automat în conformitate cu standardul
	Viteza de incalzire	
	Viteza de agitare	
ASTM D93B	T_{efp}	0°C
	ΔT	Parametrii sunt setati automat în conformitate cu standardul
	Viteza de incalzire	
	Viteza de agitare	
Additional	T_i	0°C
	T_f	0°C
	ΔT	0.0°C
	V1	0.0°C/min
	V2	0.0°C/min
	Viteza de agitare	0 rpm

6.5. Schimbarea parametrilor programului

Schimbarea parametrilor de program este posibilă numai înainte de începerea testului. Pentru a modifica parametrii trebuie să deschizi meniul de configurare apăsând tasta MENU și selectând «Edit» în secțiunea «Mode». Se va deschide fereastra de editare a parametrilor ca în fig. 7.

TEST MODE 1		SELECT FIELD CHANGE VALUE DISCARD CHANGES SAVE CHANGES	
Standard	GOST 6356-75		
Title	FCO_192		
Expected Flash point	192°C		
Heating rate	5.5 °C/min	Ignition interval	2°C
		Stirrer speed	120RPM

a)

TEST MODE 1		SELECT FIELD CHANGE VALUE DISCARD CHANGES SAVE CHANGES	
Standard	User mode		
Title	FCO_192		
Search Range	175°C 209°C		
Heating rate	5.5 °C/min 5.5 °C/min	Ignition interval	2.0°C
		Stirrer speed	120RPM

b)

Fig. 7. Fereastra de editare parametrilor.

a) pentru metode standard; b) pentru metode suplimentare.

Prin apăsarea și selectați parametrul pe care vreți să-l editați și apoi schimbați valoarea cu tastele . Pentru a confirma apăsați tasta enter. Pentru a anula și a vă întoarce la meniul principal apăsați tasta .





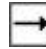


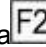



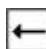

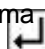
Editati numele programului selectand campul «Title» cu  si  si apasati  si mentineti. Se va edita numele ca in fig. 8.




Fig. 8. fereastra de editare program.


si Selectati un simbol cu tastele , ,  si  . Introduceti simbolul selectat cu tasta  iar pentru a sterge simbolul tastati  . Pentru a confirma si a salva valoarea utilizati  iar pentru a anula, apasati  si va veti intoarce la meniul principal. Pentru urmatorul digit folositi tastele  si  . Pentru a confirma parametrul apasati  si veti fi redirectionati catre editarea urmatorului parametru.

ATENTIE! Nu este posibil să salvați programe având parametri invalizi sau nici un nume.

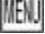
6.6. Creerea unui nou program

Pentru a crea un nou program deschideți meniul setup apăsând tasta  și selectați «**New Mode**» în secțiunea «**Mode**». Se va deschide fereastra de editare a parametrilor. Selectați metoda de testare cu tastele



În funcție de metoda selectată va apărea un parametru anume în fereastra  (vezi fig. 7a, b). După alegerea unei metode introduceți numele programului și salvați cu tasta enter (vezi fig. 8).

6.7. Stergerea unui program

Pentru a șterge un program deschideți meniul setup apăsând tasta  și selectați «**Delete**» în secțiunea «**Mode**». Programul se va șterge din memoria aparatului.

ATENȚIE! Puteti șterge toate programele din memoria aparatului cu excepția unuia singur. Ștergerea ultimului este imposibilă.



6.8. Procedura de operare

Înainte de prima utilizare a aparatului, vă rugăm, reglați unitatea de aprindere în conformitate cu punctul 7.4 din acest manual.

ATENȚIE! Înainte de a porni aparatul asigurați-vă că acesta este conectat la o sursă de gaz și valva de reglare a alimentării cu gaz, situată pe panoul frontal al aparatului, este pe deplin închisă.

1. Porniți aparatul folosind întrerupătorul de curent.


ATENȚIE! Când se utilizează unitatea de aprindere de gaz asigurați-vă că în «Ignition» MENIU valoarea «gaze» este selectată (vezi pct. 7.2).

2. Apăsând tastele   selectați programul dorit. Dacă este necesar ajustați parametrii (vezi secțiunea 6.5 pentru detalii).

3. Scoateți cupa; vezi secțiunea 5.3 pentru mai multe informații.

4. Pregătiți proba conform GOST 6356-75 și plasați-o în cupa astfel încât nivelul lichidului să fie la marcajul intern al cupei.

5. Plasați cupa în aparat; vezi secțiunea 5.3 pentru mai multe informații.

6. Aprindeți arzătorul¹. Ridicați unitatea de igniție utilizând un maner și apăsați tasta . Aceasta va încălzi filamentul de igniție; veți vedea valoarea curentă a puterii de încălzire, determinată în setări (vezi secțiunea 7.2) pe displayul adiacent indicatorului de igniție. Înainte de a da drumul la gaz, asigurați-vă că

⁶ Numai dacă aparatul are o unitate de igniție.

filamentul este aprins. Deschideți valva de gaz de 1-2 ori. Filamentul va aprinde arzătorul. Cu ajutorul valvei ajustați mărimea flămei conform cerințelor standard (de ex. conform GOST 6356-75 flama trebuie să fie în forma de minge cu diametrul de 4 mm). Cu ajutorul unui maner coborâți unitatea de igniție într-o poziție funcțională.

ATENȚIE! când lucrați cu unitatea de igniție cu gaz filamentul este pornit în permanentă. dacă strălucește este normal, și nu necesită intervenție.

7. pentru a începe testul apăsați o dată butonul «Start-Stop-Reset». Va începe imediat încălzirea și agitarea probei iar statusul testului va fi afișat pe ecran.

ATENȚIE! Atunci când se lucrează cu aparatul vă rugăm să observați, că anumite părți ale sale devin foarte fierbinți. Amintiți-vă că manipularea de echipamente fierbinți poate duce la arsuri. Aveți grijă atunci când funcționează probele încălzite plasate în interiorul aparatului.

În timpul testului pe display se afișează următoarele informații (fig.9):

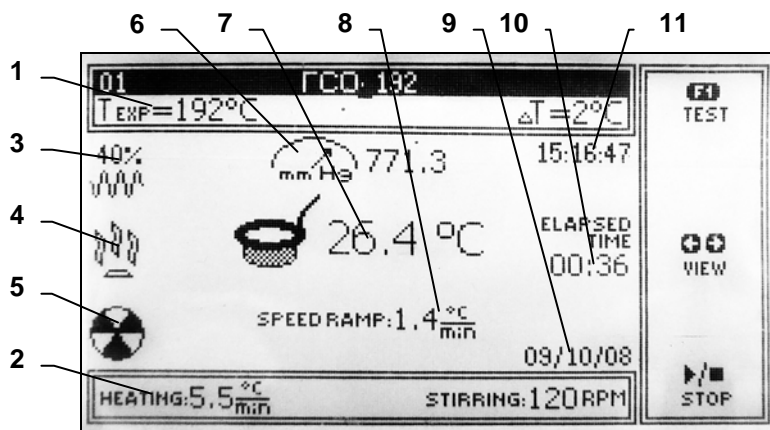

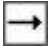


Fig. 9. Statusul testului afișat pe ecran

- Fereastra parametrilor program în curs (1).
- Fereastra parametrilor program adițional (2).
- Indicator de igniție (3) – notează activarea unității de igniție.
- Indicator comutator încălzire (4) – clipește când încălzirea funcționează.
- Indicator comutator ventilator (5) – clipește când ventilația funcționează.
- valoarea presiunii atmosferice curente măsurată de un senzor intern (6).
- valoarea curentă a temperaturii T_{cup} (7).
- Viteza de încălzire (8).
- Current date (9).

- Timpul scurs din momentul inceperii testului (10).
- Timpul curent (11).

Cu tastele  si  puteti comuta intre fereastra principala ce afiseaza informatii despre testul in curs si o fereastră aditională, vezi fig. 10.

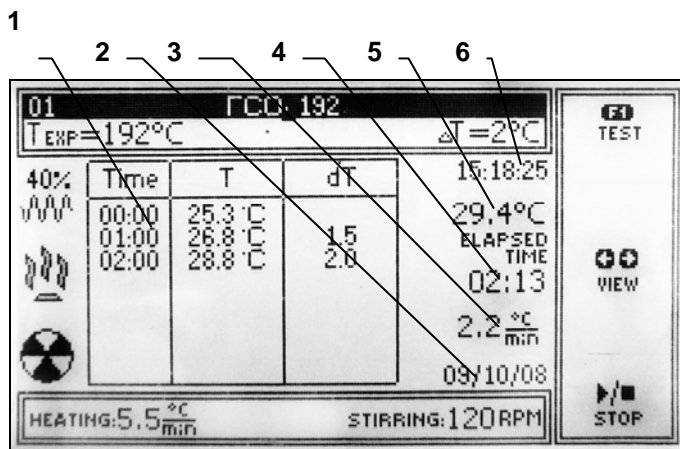



Fig. 10. fereastra aditională pentru afisarea informatiilor despre procedura de testare.

În fereastra suplimentară următoarele elemente sunt afișate:

- Tabel parametrii test curent (1).
- Data curentă (2).
- Viteza de încălzire (3).
- Timpul scurs din momentul începerii testului (4).
- Temperatura probei T_{cup} (5).
- Timp curent (6).

Acest tabel afișează parametrii testului în desfășurare, înregistrați din minut în minut (fiecare linie înseamnă o nouă intrare).

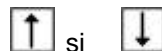- Timpul scurs din momentul începerii testului
- Temperatura probei
- Viteza de încălzire



Puteti naviga printre informatii in tabel cu tastele

În timpul testului aparatul încălzește proba până la $T_{efp} - 17^{\circ}\text{C}$ (pt metodele standard) ori T_i (pt metodele aditionale) apoi începe coborarea unitatii de ignitie în cupa după un interval de timp determinat de creșterea de temperatură ΔT . Aparatul emite un semnal sonor cu 0.5°C înainte de următoarea coborare a unitatii de ignitie în cupa.

momentul scanteii este inregistrat de un detector de scanteie. Coborarea periodica a unitatii de ignitie in cupa si incalzirea acesteia se opreste si incepe procesul de racire a probei la temperatura camerei cu ventilatorul.

Dupa inregistrarea flamei pe display apare urmatoarea informatie (vezi fig. 11):






Fig. 11. fereastra cu informatii referitoare la test.

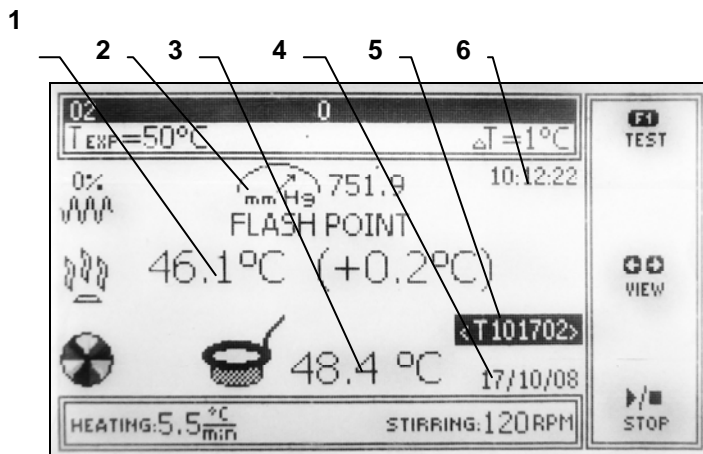- Corectia valorii punctului de inflamabilitate (1) pentru presiunea atmosferica este data in paranteze
- Presiunea atmosferica curenta (2).
- Temperatura curenta a probei T_{cup} (3).
- data curenta (4).
- Denumirea fisierului cu date salvate (5) si
- Timp curent (6).

Cu tastele  si  puteti comuta intre fereastra principala si o fereastra aditionala, ca in fig. 12.

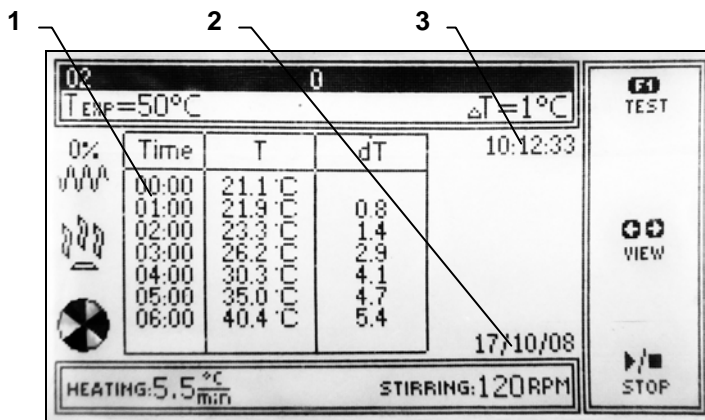


Fig. 12. Informatii auxiliare despre testul in curs.

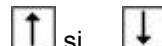
In fereastra aditionala sunt afisati urmatoorii parametrii:

- tabel intrarea parametrilor curenti test (1).
- data curenta (2).
- Ora curenta (3).

Acest tabel arata toate intrarile parametrilor curenti, memorati din minut in minut (fiecare linie inseamna o intrare).

- Timpul scurs din momentul inceperii testului
- Temperatura probei
- Viteza de incalzire

Puteti naviga printre informatii in tabel cu tastele



si

Rezultatele testului sunt afisate pana la apasarea butonului «Start-Stop-Reset». Dupa aceea aparatul trece in modul de selectare a programului.

ATENTIE! La încheierea testului, nu uitați să închideți valva de alimentare cu gaz. Dacă o sursă de gaz are supapa sa, această supapă de asemenea, să fie închisă⁷. Dacă este necesar, puteti anula testul înainte de finalizarea acestuia. Pentru a face acest lucru apăsați pe «Start-Stop-Reset» buton, aceasta va opri testul și următorul mesaj va fi afișat, vezi fig. 13.

⁷ Numai daca aparatul are unitate de ignitie cu gaz.



Fig. 13. Test oprit înainte de finalizare.

Dupa apasarea butonului «Start-Stop-Reset» aparatul trece in modul de selectare a programului. La sfarsitul testului, ventilatorul porneste automat pentru racirea aparatului si daca este nevoie poate fi activat si agitatorul cu tasta **F2** pentru a raci proba uniform.

6.9. Vizualizarea rezultatelor salvate

Rezultatele sunt salvate in memoria aparatului ca fisiere text. Pentru a vedea rezultatele testului deschideti meniul setup cu tasta **MENU** si selectati «Results». Se va deschide o fereastra cu rezultatele salvate ca in fig. 14.






Fig. 14. Fereastra cu rezultatele salvate

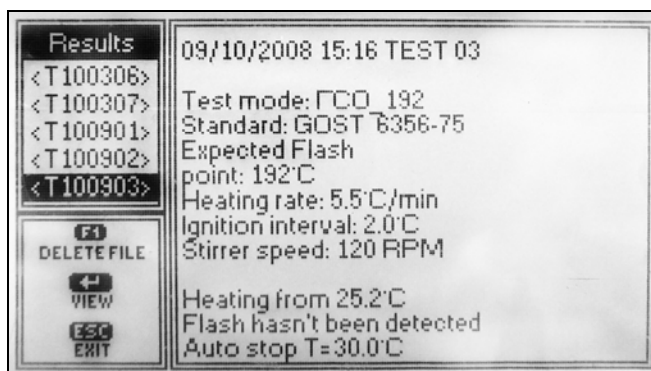In partea stanga a ferestrei este o lista cu fisierele salvate. In dreapta - fereastra de vizualizare.





Rezultatele sunt stocate in fisiere text; identitatea lor este afisata la momentul stoparii sau al terminarii testului (vezi fig. 11 item 5).


Selectati un fisier cu  si . Pentru a vedea fisierul apasati tasta .

Pentru a sterge fisierul apasati tasta .

Puteti naviga prin text utilizand tastele  si  in modul view file. In memoria aparatului pot fi stocate peste 2000 de intrari.

6.10. Meniul de configurare al aparatului

Meniul setup este deschis apasand tasta . O lista de sectiuni va fi afisata. Navigati in lista cu tastele  si . Selectati o sectiune apasand .

Anulati selectia si iesiti din meniu apasand tast .

Următoarele secțiuni sunt disponibile în meniul de configurare:

- **Results** – vedeti intrarile salvate (vezi sectiunea 6.9).
- **Stirrer** – pornirea obligatorie a agitatorului. Folosit pentru a agita preliminar o proba înainte de începerea testului. Un mod de pornire permanenta pentru agitator este bifarea elementului de meniu corespunzător.
- **Cooler** – pornirea obligatorie a ventilatorului. Folosit pentru racirea rapida a probei. Un mod de pornire permanenta a ventilatorului este bifarea elementului de meniu corespunzător.
- **Ignition** (vbezi sectiunea 7.2).
 - **Electrical** – pentru alegerea unitatii electrice de ignitie.
 - **Gas** – tpentru alegerea unitatii de ignitie pe gaz.
 - **Coil heating** – ajustarea temperaturii filamentului.
- **Flash** – configurarea parametrilor detectorului de flama. Acest element permite configurarea nivelului de activare a detectorului de scanteie.

ATENTIE! Aparatul se livreaza cu detectorul ajustat.

Modificarea valorii de configurare fără necesitate urgentă, nu este recomandată. O valoare incorectă poate duce la vicierea rezultatele testelor.

- **Language** – selectarea limbii de comunicare cu aparatul.

7. Conectarea la un PC

Aparatul poate fi conectat la un PC prin portul USB. PC-ul trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- Sistem de operare MS Windows 2000/XP.
- Un port USB liber.

Pentru a conecta aparatul la PC utilizați un cablu USB A-B din setul de accesorii ale aparatului. Conectați un capăt la aparat și unul la PC (fig.3 item 7).

La prima conectare a aparatului la PC cu MS Windows 2000 XP instalat, aparatul detectează automat și instalează driverul USB. Nu sunt necesare drivere specifice; aparatul se vede pe calculator ca un compact disc. Fișierele cu rezultate sunt salvate în folderul RESULTS⁹. Le puteți vedea, copia și șterge cu interfața MS Windows.

8. Intreținere

8.1. Curățare și întreținere

Înainte de a curăța aparatul deconectați-l de la sursa de curent și asigurați-vă că a ajuns la o temperatură suportabilă.

Întreținerea și curățarea se fac cu aparatul deconectat de la sursa de curent. Curățați suprafața exterioară utilizând agenți neutri de curățare cum ar fi spray pentru aparate obișnuite de birou.

ATENȚIE! Nu folosiți solvenți organici, lichide agresive (de exemplu acetona sau alcool izopropilic) și abrazivi pentru curățarea panoul de control și părțile vopsite.

⁹ Folderul RESULTS poate fi șters dacă nu s-au efectuat teste.

8.2. Unitatea de ignitie cu gaz

Aparatul se livreaza cu unitatea de ignitie electrica instalata. Pentru a instala unitatea de ignitie cu gaz urmati pasii de mai jos:



Scoateti cupa ca in sectiunea 5.3 din acest manual. Utilizand manerul ridicati unitatea de ignitie in pozitie verticala.



Folosind o surubelnita (inclusa in kitul de accesorii) slabiti surubul de blocare al unitatii de ignitie.



Impingeti cu surubelnita un ax ce retine unitatea electrica in suport. Indepartati unitatea electrica de ignitie, si schimbati filamentul de aprindere electrica cu filamentul de aprindere cu gaz (vezi sectiunea 7.3).



Instalati un bec de gaz. Blocati-l cu același ax.



Blocati cu surubul. Folositi surubelnita.



Instalati unitatea electrica de ignitie pe consola langa becul de gaz si blocati-o cu un surub M3. Unitatea electrica de ignitie trebuie instalata perpendicular pe centrul becului de gaz.



In dreapta este unitatea de ignitie cu gaz.



Conectati becul de gaz la mufa localizata in panoul de sus al aparatului, printr-un furtun.

Dupa instalarea unitatii de ignitie deschideti meniul setup apasand tasta



si selectati «**Gas**» in sectiunea «**Ignition**» .

Puteti ajusta temperatura serpentinei electrice de incalzire pentru aprinderea becului de gaz selectand «**Coil heating**» in sectiunea «**Ignition**» **din meniul de configurare.**

Dupa instalarea unitatii de ignitie cu gaz nu uitati sa conectati aparatul la o sursa de gaz (vezi sectiunea 5.2).

Instalarea unitatii electrice de ignitie se face in ordine inversa. Selectati «**Electrical**» in sectiunea «**Ignition**» din meniul de configurare.

Cand lucrati cu unitatea electrica de ignitie incalzirea filamentului se face in 2 trepte. Se incalzeste usor in timpul testului si numai cu 2 secunde inainte de coborarea in cupa se finalizeaza incalzirea. Aceasta permite incalzirea mai rapida a filamentului la temperatura necesara. Valori recomandate: 20% and 70%.

ATENTIE! Funcționare continuă cu maximum de încălzire scade durata de viață a filamentului

temperatura filamentului unitatii electrice de ignitie se seteaza selectand «**Coil heating**» in sectiunea «**Ignition**» a meniului setup. Cand selectam unitatea electrica de ignitie in sectiunea «Coil heating» avem doi parametri (fig. 15):

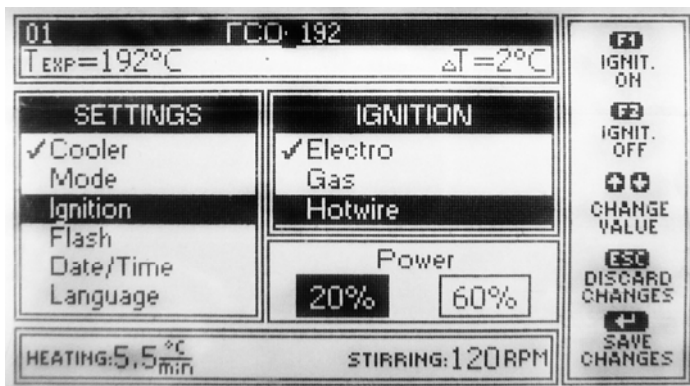



Fig. 15. Meniul «Coil heating» pentru unitatea electrica de ignitie.

- Viteza de preincalzire (% din maxim).
- Viteza de incalzire la ignitie (% din maxim).

Selectarea parametrilor se face utilizand tastele  si , schimbarea valorilor se face cu  si . Pentru a termina editarea parametrilor

apasati tasta , pentru a anula valorile si a iesi din meniu apasati tasta



Dupa schimbarea unitatii de ignitie incepeti setarea descrisa in sectiunea 7.4 din manual.

8.3. Schimbarea filamentului cu incalzire electrica

Schimbarea acestuia este necesara cand schimbam unitatea de ignitie de pe electric pe gaz si invers, si cand se strica filamentul de incalzire electrica in timpul functionarii.

Aparatul se livreaza cu 2 tipuri de filamente (vezi fig. 16).

- Un filament pentru ignitie electrica (marcat cu un manson negru, vezi fig. 16, a).
- Un filament pentru ignitie cu gaz (marcat cu un manson rosu, vezi fig. 16, b).

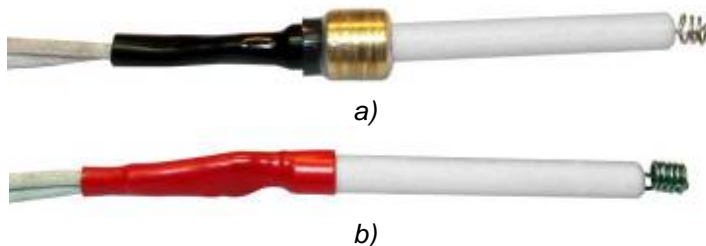


Fig. 16. Filamentele de ignitie.
a) electrica; b) cu gaz.

ATENȚIE! Schimbarea și reglarea filamentului ar trebui să fie puse în aplicare cu oprire de la rețeaua de alimentare și după răcirea completă a tuturor părților încălzite ale aparatului

Pentru a schimba filamentul deșurubați șurubul de blocare (fig.17 item 1) cu surubelnita inclusa in setul de accesorii, si indepartati cu grija filamentul (din partea izolata). Pentru a instala filamentul procedati astfel:

- Inserati filamentul corespunzator unitatii de ignitie.
- Coborati cu grija unitatea de ignitie in cupa, rotind caruselul capacului (fig. 17 item 3) in sensul acelor de ceasornic cu mana, astfel incat filamentul sa fie la nivelul capacului cupei. Aveți grija sa nu deteriorati capacul.


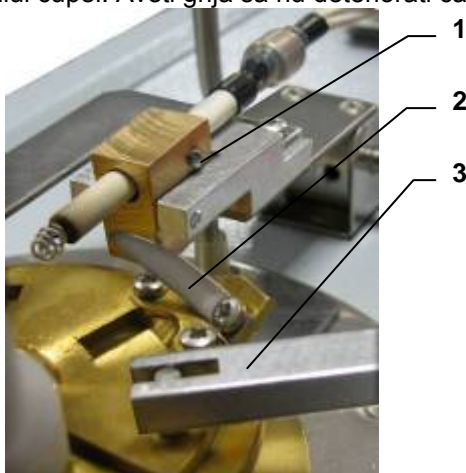


Fig. 17. Filamentul unitatii de ignitie electrica

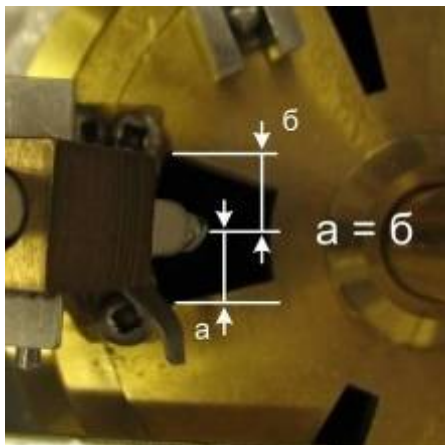- Ajustati pozitia filamentului astfel incat sa existe o distanta intre el si marginea orificiului din capac de cel puțin 3 mm (vezi fig. 18 a).



a)



b) Fig. 18.

Pozitia filamentului in orificiul din capacul cupei

- a) Distanța între filament și marginea orificiului,
b) ajustarea poziției filamentului în orificiu

- Coborâți complet unitatea de igniție în cupa, răsucind caruselul capacului ferm în sensul acelor de ceasornic și verificați ca distanța între centrul filamentului și marginile din dreapta și stânga orificiului din capac să fie aceleași (fig. 18, b). Când răsuciți capacul aveți grijă ca filamentul să nu atingă vreo gaură din capac.
- Blocati filamentul cu o surubelnita (fig. 17 item 1).

După blocare, verificați dispozitivul de retragere (fig. 17 item 2) – după coborârea unității de igniție în cupa dispozitivul ar trebui să îl întoarcă în poziția inițială. Dacă este necesar ajustați poziția dispozitivului îndoiindu-l ușor.

ATENȚIE! După schimbarea filamentului de aprindere, puneți în aplicare neapărat sistemul de configurare descris la secțiunea 7.4 din acest manual.

8.4. Ajustarea unitatii de ignitie

Ajustarea unitatii de ignitie se face la instalarea aparatului, dupa schimbarea unitatii de ignitie (vezi sectiunea 7.2), schimbarea filamentului de incalzire electric (vezi sectiunea 7.3) si daca este necesar in timpul operarii. Inainte de ajustarea unitatii cu cupa instalata apasati tasta «TEST» si verificati acuratetea coborarii unitatii de ignitie. Avceasta trebuie sa coboare lin, fara sa se atinga sau fara sa zgariale cupa, suficient de adanc.

Pentru ajustarea unitatii de ignitie procedati astfel:

- Ajustati inaltimea arzatorului peste cupa folosind o surubelnita adecvata (fig. 14).



Fig. 14. | Surubul de ajustare a unitatii de ignitie.

- Ajustati in pozitie firele electrice si/sau furtunurile de gaz la arzator astfel incat unitatea de ignitie sa coboare fara niciun efort. Ajustarea furtunurilor se face prin rasucirea si miscarea furtunurilor pe tubul arzatorului.
- Ajustati pozitia unitatii de ignitie fata de cupa (slabiti surubul de prindere in carcasa aparatului si ajustati p;ozitie unitatii de ignitie astfel incat sa coboare cu precizie in orificiul din cupa; fixati surubul de blocare)

8.5. Mentenanta si reparatii

Aparatul nu necesita mentenanta daca instructiunile de operare sunt urmate iar aparatul este in permanenta ingrijit. Reparatiiile se fac doar de catre personal calificat. daca apar probleme, sunati la departamentul de asigurare a calitatii al producatorului:

Chelieva Lane, 12, 193230, St. Petersburg. Tel. (812) 325-2836, fax (812) 325-2824, e-mail: info@lojp.ru sau la serviciul tehnic (812) 449-8195

9. depozitare si transport

Aparatul trebuie pastrat in ambalajul original pe toata perioada garantiei la o temperatura de +5 to +40°C si o umiditate relativa nu mai mare de 80% pentru temperaturi de pana la 31°C cu imiditatea relativa scazand liniar pana la 50% pentru temperaturi in urcare pana la 40°C.

Aparatul poate fi pastrat fara ambalajul original la o temperatura de +5 to +40°C si o umiditate relativa nu mai mare de 80% pentru temperaturi de pana la 31°C cu imiditatea relativa scazand liniar pana la 50% pentru temperaturi in urcare pana la 40°C

Transportul aparatului este posibil numai impachetat, la temperaturi de -50 to +50°C si umiditate relativa nu mai mare de 95%. Transportul prin aer este permis numai in module incalzite si presurizate.

Nu permiteti in timpul transportului caderea sau avarierea aparatului!

Garantie

Garantia aparatului este de an si se acorda numai in cazul respectarii tuturor regulilor de operare, intretinere si transport mentionate mai sus, dar ne acopera filamentele de aprindere si consumabilele.

Orice reclamație poate fi depusă completând formularul pe care îl găsiți accesând linkul: <http://www.loip.ru/site/ru/docs/reclamation.html>.

Inainte de a depune o reclamație, va recomandam sa sunati la tel. (812) 449-8195.

Aparatul este sigilat. Deschiderea neautorizată a acestuia (ruperea sigiliului), duce la pierderea garanției. Pentru eventualele probleme minore cereți permisiunea scrisă a producătorului pentru deschiderea aparatului.

11. Reciclarea echipamentului

Dupa casare, echipamentul poate fi reciclat conform normelor in vigoare.

12. Test certificate

The closed cup flash point tester LOIP LP-093 s/n _____ passed the primary acceptance and was qualified for operation.

Manufacture date _____

stamp Responsible assembler _____

Supervisor _____

